

**SIÈGES ERGONOMIQUES  
VWR®**

*Quand  
l'innovation  
devient  
révolution*



**Garantie 5 ans**

## L'ergonomie entre dans une nouvelle ère



Tabouret de laboratoire  
avec roulettes  
132-1099



Chaise de laboratoire avec  
appui-lombaire et roulettes  
132-1104



Chaise de laboratoire avec appui-  
lombaire, repose-pieds et patins  
132-1105



Tabouret de laboratoire avec  
repose-pieds et patins  
132-1100


## Sièges ergonomiques en polyuréthane

Les assises sont composées de polyuréthane souple de 40 mm d'épaisseur. Elles offrent un confort exceptionnel et une très grande résistance.

- Résistent aux étincelles, aux outils coupants, aux produits chimiques et aux acides légers.
- Faciles à nettoyer
- Pas d'effet de transpiration
- Adaptés à tous les milieux (laboratoires, industriels, hôpitaux)





## Des bienfaits prouvés scientifiquement

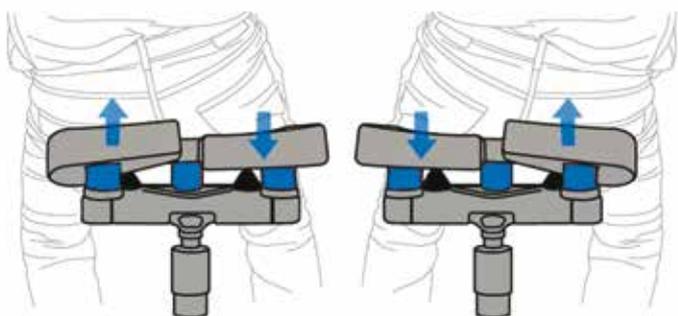

Aucun individu n'est parfaitement symétrique dans sa morphologie. C'est pourquoi une majorité de personnes souffre de maux de dos, accompagnés parfois d'une sensation de lourdeur dans les jambes. La réponse à ce problème se trouve dans les principales caractéristiques de ce siège. Une bonne position de travail est d'abord une posture dynamique permettant de bouger, la mobilité favorisant en effet la circulation sanguine. Une assise courte inclinée vers l'avant, scindée en deux parties, reposant sur des silent-blocs disposés en triangle, permet de rééquilibrer le corps naturellement et de favoriser la circulation sanguine des membres inférieurs. La capacité de déformation de l'assise permet une meilleure répartition des pressions lors des mouvements : par exemple, lors d'un test avec appui sur une pédale, la différence de pression entre chaque cuisse diminue de 82% par rapport à un siège classique, la pression sous la cuisse qui commande la pédale étant quant à elle 49% moins forte.

Cette gamme a été développée en étroite collaboration avec une société spécialisée dans la métrologie du mouvement humain.

De multiples tests, réalisés avec différents types d'assises, d'individus, de postures et de mouvements, et basés sur la technologie de capture du mouvement, ont permis de mettre en évidence l'impact bénéfique de ce siège sur la posture et plus précisément sur le comportement du rachis vertébral.

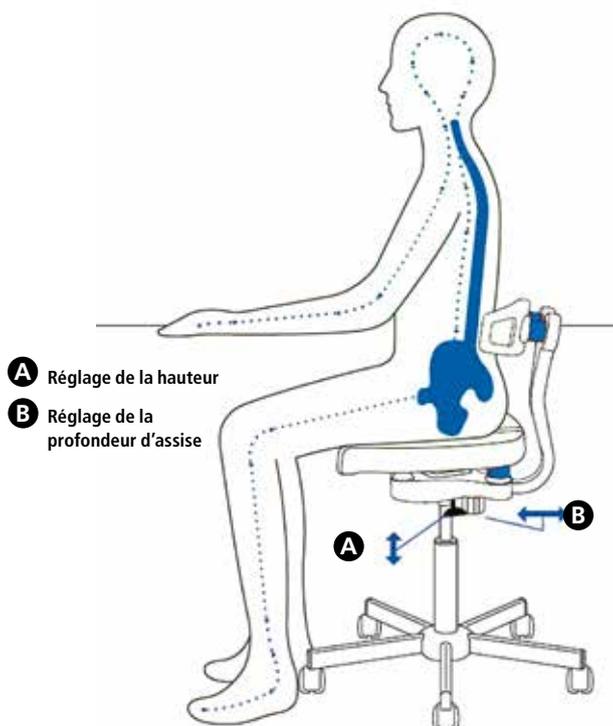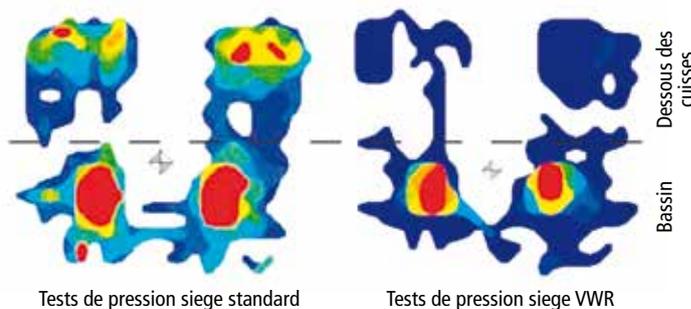

Sur un siège de travail, le dossier n'est que peu ou mal utilisé. Dans ce dernier cas, il deviendra votre pire ennemi. C'est pour cette raison que ce siège n'est pas équipé d'un dossier classique, mais d'un appui lombaire, dont la fonction est de vous aider à trouver immédiatement la posture idéale.

Ce siège VWR est doté d'un réglage en hauteur par colonne lift-gaz, qui constitue la seule intervention manuelle, les autres réglages étant intuitifs afin de faciliter l'utilisation du siège par l'auto-adaptation. L'inclinaison de l'assise permet de concentrer les appuis sur la région anatomique dévolue à cette fonction, c'est-à-dire les ischions. L'orientation de l'assise facilite en outre une statique redressée et minimise les contraintes rachidiennes. Le centre de gravité moyen recule pour concentrer les appuis sous le bassin et favoriser une posture plus ergonomique.

Description	Hauteur (mm)	Code Art.
Tabouret de laboratoire avec roulettes pour sol dur	510 - 645	132-1099
Tabouret de laboratoire avec repose-pieds et patins	610 - 855	132-1100
Chaise de laboratoire avec appui-lombaire et roulettes pour sol dur	510 - 645	132-1104
Chaise de laboratoire avec appui-lombaire, repose-pieds et patins	610 - 855	132-1105

Conforme aux principales exigences de sécurité de :

- NF EN1335-3
- NF D655761
- DIN 68877
- EN 1021-1-2

### Allemagne

VWR International GmbH  
Hilpertstraße 20a  
D - 64295 Darmstadt  
Freecall: 0800 702 00 07  
Fax: 0180 570 22 22\*  
Email: [info@de.vwr.com](mailto:info@de.vwr.com)  
\*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

### Autriche

VWR International GmbH  
Graumannsgasse 7  
1150 Wien  
Tel.: 01 97 002 0  
Fax: 01 97 002 600  
Email: [info@at.vwr.com](mailto:info@at.vwr.com)

### Belgique

VWR International bvba  
Researchpark Haasrode 2020  
Geldenaaksebaan 464  
3001 Leuven  
Tel.: 016 385 011  
Fax: 016 385 385  
Email: [vwrbe@be.vwr.com](mailto:vwrbe@be.vwr.com)

### Danemark

VWR - Bie & Berntsen  
Transformervej 8  
2860 Søborg  
Tel.: 43 86 87 88  
Fax: 43 86 87 90  
Email: [info@dk.vwr.com](mailto:info@dk.vwr.com)

### Espagne

VWR International Eurolab S.L.  
C/ Tecnologia 5-17  
A-7 Llinars Park  
08450 - Llinars del Vallès  
Barcelona  
Tel.: 902 222 897  
Fax: 902 430 657  
Email: [info@es.vwr.com](mailto:info@es.vwr.com)

### Finlande

VWR International Oy  
Valimotie 9  
00380 Helsinki  
Tel.: 09 80 45 51  
Fax: 09 80 45 52 00  
Email: [info@fi.vwr.com](mailto:info@fi.vwr.com)

### France

VWR International S.A.S.  
Le Périgares – Bâtiment B  
201, rue Carnot  
94126 Fontenay-sous-Bois cedex  
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,18 € TTC/min)  
Fax: 0 825 02 30 35 (0,18 € TTC/min)  
Email: [info@fr.vwr.com](mailto:info@fr.vwr.com)

### Hongrie

VWR International Kft.  
Simon László u. 4.  
4034 Debrecen  
Tel.: (52) 521-130  
Fax: (52) 470-069  
Email: [info@hu.vwr.com](mailto:info@hu.vwr.com)

### Irlande / Irlande du Nord

VWR International Ltd /  
VWR International (Northern Ireland) Ltd  
Orion Business Campus  
Northwest Business Park  
Ballycoolin  
Dublin 15  
Tel.: 01 88 22 222  
Fax: 01 88 22 333  
Email: [sales@ie.vwr.com](mailto:sales@ie.vwr.com)

### Italie

VWR International PBI S.r.l.  
Via San Giusto 85  
20153 Milano (MI)  
Tel.: 02-3320311/02-487791  
Fax: 800 152999/02-40090010  
Email: [info@it.vwr.com](mailto:info@it.vwr.com)

### Norvège

VWR International AS  
Haavard Martinsens vei 30  
0978 Oslo  
Tel.: 0 2290  
Fax: 815 00 940  
Email: [info@no.vwr.com](mailto:info@no.vwr.com)

### Pays-Bas

VWR International B.V.  
Postbus 8198  
1005 AD Amsterdam  
Tel.: 020 4808 400  
Fax: 020 4808 480  
Email: [info@nl.vwr.com](mailto:info@nl.vwr.com)

### Pologne

VWR International Sp. z o.o.  
Limbowa 5  
80-175 Gdansk  
Tel.: 058 32 38 200 do 204  
Fax: 058 32 38 205  
Email: [info@pl.vwr.com](mailto:info@pl.vwr.com)

### Portugal

VWR International - Material de  
Laboratório, Lda  
Edifício Neopark  
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D  
2790-221 Carnaxide  
Tel.: 21 3600 770  
Fax: 21 3600 798/9  
Email: [info@pt.vwr.com](mailto:info@pt.vwr.com)

### République Tchèque

VWR International s. r. o.  
Veetee Business Park  
Pražská 442  
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice  
Tel.: +420 321 570 321  
Fax: +420 321 570 320  
Email: [info@cz.vwr.com](mailto:info@cz.vwr.com)

### Royaume-Uni

VWR International Ltd  
Customer Service Centre  
Hunter Boulevard - Magna Park  
Lutterworth  
Leicestershire  
LE17 4XN  
Tel.: 0800 22 33 44  
Fax: 01455 55 85 86  
Email: [uksales@uk.vwr.com](mailto:uksales@uk.vwr.com)

### Suède

VWR International AB  
Fagerstagatan 18a  
163 94 Stockholm  
Tel.: 08 621 34 00  
Fax: 08 621 34 66  
Email: [kundservice@se.vwr.com](mailto:kundservice@se.vwr.com)

### Suisse

VWR International GmbH  
Lerzenstrasse 16/18  
8953 Dietikon  
Tel.: 044 745 13 13  
Fax: 044 745 13 10  
Email: [info@ch.vwr.com](mailto:info@ch.vwr.com)

### Turquie

VWR International Laboratuvar  
Teknolojileri Ltd.Şti.  
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi  
Ördekcioglu İşmerkezi No.32/1  
34896 Pendik - Istanbul  
Tel.: +90216 598 2900  
Fax: +90216 598 2907  
Email: [info@tr.vwr.com](mailto:info@tr.vwr.com)

### Australie

VWR International, Pty Ltd.  
Level 1, Unit 1a/60 Enterprise Place  
Tingalpa, Queensland, 4173  
Tel.: 1300 727 696  
Fax: 1300 135 123  
Email: [sales@au.vwr.com](mailto:sales@au.vwr.com)

### Chine

VWR International China Co., Ltd.  
Shanghai Branch  
Room 256, No. 3058 Pusan Road  
Pudong New District  
Shanghai 200123  
Tel.: +86-21-5898 6888  
Fax: +86-21-5855 8801  
Email: [info\\_china@vwr.com](mailto:info_china@vwr.com)

### Inde

VWR Lab Products Private Limited  
No.139. BDA Industrial Suburb,  
6th Main, Tumkur Road, Peenya Post,  
Bangalore, India – 560058  
Tel.: +91-80-28078400  
Fax: +91-80-28078410  
Email: [vwr\\_india@vwr.com](mailto:vwr_india@vwr.com)

### Nouvelle-Zélande

Global Science - A VWR Company  
241 Bush Road  
Albany 0632, Auckland  
Tel.: 0800 734 100  
Fax: 0800 999 002  
Email: [sales@globalscience.co.nz](mailto:sales@globalscience.co.nz)

### Singapour

VWR Singapore Pte Ltd  
18 Gul Drive  
Singapore 629468  
Tel.: +65 6505 0760  
Fax: +65 6264 3780  
Email: [sales@sg.vwr.com](mailto:sales@sg.vwr.com)

RENDEZ-VOUS SUR  
[WWW.VWR.COM](http://WWW.VWR.COM)  
ET RETROUVEZ  
NOS NOUVEAUTÉS  
ET OFFRES SPÉCIALES